

石膏
トラップ用
別売品

石膏沈殿物処理剤 DRY TECH 2

専用使い捨てネット

ドライテック2&廃棄ネット

トラップ内にたまった沈殿物の処理もラクラク。
カンタン掃除の秘密はドライテック2と1枚のネット!

いままで処理がめんどろだった石膏沈殿物も、ドライテック2と廃棄ネットのダブル効果でさらに手入れが簡単、清潔、合理的に。使いやすさを考えた東京技研の石膏トラップです。

内袋を
ポン!

固化力&消臭力、
パワーアップして新登場!



ネットごと
ポイッ。



ドライテック2(別売)の特徴

- ①内袋ごと投入してかき混ぜるだけ。どなたにも簡単に固化処理することができます。
- ②粉末が飛び散ったりまわりにこぼれたりせず、安全で衛生的です。
- ③吸水・保持力が強く、吸水した水分を保持します。
- ④消臭効果があり、石膏トラップ内の悪臭を低減します。



※内袋を破らないようにご注意ください。
※手でも簡単にカットできます。

廃棄ネット(別売)の特徴

- ①ドライテック2と廃棄ネットのダブル効果で、石膏トラップのお掃除が、簡単にできます。
- ②廃棄ネットごと石膏トラップから取り出せます。

■ドライテック2を使つての廃棄方法

作業を始めるその前に!

必ず保護手袋等を着用してください。

石膏トラップの中心部のカゴにたまった大きなゴミを捨て、仕切り板の中心の円筒部分にたまった沈殿物をトラップ内にあけてください。

1 トラップ内の水を捨てる



石膏トラップ内の水を、石膏沈殿物より2cm位の高さまで捨てます。

2 内袋のまま中に入れる



ドライテック2の外袋をカットノッチから切り取り、内袋を取り出して、封を開けずに、そのままトラップの中に入れます。

3 へら等でかき混ぜる



内袋が溶解後に、へら等でかき混ぜてください。1分程度で、粒状ゲルになり固化します。

4 廃棄ネットごと取り出す



廃棄ネットごと取り出し、産業廃棄物として処理してください。

※廃棄ネットの付いていない石膏トラップの場合は、シャベル、へら等で掻き出してください。

●石膏トラップは、清掃後もとどおり設置し、必ず水漏れのないことをご確認ください。●月に一度の清掃をおすすめします。●石膏トラップに回収された石膏泥は、産業廃棄物(汚泥)に該当しますので、自治体毎に定められた方法により適切に処理する必要があります。なお、汚泥に定められた有害物質が含まれている場合は、特別管理産業廃棄物(汚泥)に該当します。



石膏トラップの除菌・防臭剤 TRAP DEODORIZER 2

トライザー2

簡単・清潔・合理的



トライザー 2(別売)の特徴

- ①水溶性の袋入りなので、直接手を触れることなくそのまま入れられます。
- ②石膏トラップ内の臭気発生を抑制します。
- ③抗菌成分が徐々に溶け出して、除菌と防臭効果が長続きます。(約1ヵ月)

※バクテリアを利用している浄化槽の場合でも、トラップより排水された分は影響ありませんが、浄化槽内には絶対直接入れないでください。

●ご使用方法

石膏トラップ内の石膏を「ドライテック2」で清掃した後、本品1個を袋のまま中カゴに入れてください。

※水に溶ける袋ですので、袋から出さずにそのまま入れてください。

— 使用上の注意 —

- 石膏トラップ用以外の目的には使用しないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用の際には、手袋等の保護具を使用してください。
- 皮膚に付着した場合や直接手で触った場合は、石鹸でよく洗い流してください。
- 万一食べたり口に入った場合は、吐き出して口の中を水でよくすすぎ、医師の診断を受けてください。
- 使用済みのトライザー2は、ネットごと石膏沈殿物と一緒に処理してください。

石膏トラップ用別売品

ドライテック2



(製品コード: E148/04562199983916)

内袋(特殊水溶性紙使用)のまま入れてかき混ぜるだけで石膏沈殿物を一瞬のうちにゲル状に固める処理剤。(12袋入)


廃棄ネット



(製品コード: B289/04562199982322)

石膏トラップ(丸型)専用の使い捨て廃棄ネット。(12枚入)

トライザー 2

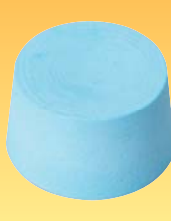

(製品コード: B318/04562199983909)

石膏トラップ専用除菌・防臭剤。袋のまま入れておくだけで効果が約1ヵ月持続します。(12個入)

石膏トラップ(丸型)お掃除3点セットプラス



(製品コード: E149/04562199983923)

ドライテック2、廃棄ネット、トライザー 2 各1個入の3点セット。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

- 【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
- 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
- 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
- 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
- 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
- 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
- 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445 (ISO13485 認証工場)



JQA-MD0058 横浜工場

歯科用吸引装置、歯科用吸引装置ポンプ、電動式吸引器及び歯面漂白加熱装置の設計・開発及び製造

210620002P

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。