



# EVERYCURE

訪問診療用ポータブルサクシオン [TCS-エブリキュア]

医療機器

診療先でらくらく操作、そしてパワフル性能。  
HEPAフィルタもついているので排気もクリーン。  
手軽に持ち運びができるサクシオンです。

て が る に  
き が る に  
訪 問 診 療

診療室と変わらない使用感を訪問先にも！

小さなボディで  
大きな吸引力

風量	風圧
約0.17m <sup>3</sup> /min	約11.0kPa

2重防振により  
実現した静音性




HEPA  
フィルタ

0.3μm以上の粉塵  
**99.97%**  
捕集します

# EVERYCURE

小さなボディに高性能がギッシリ。  
チカラ強い味方です。

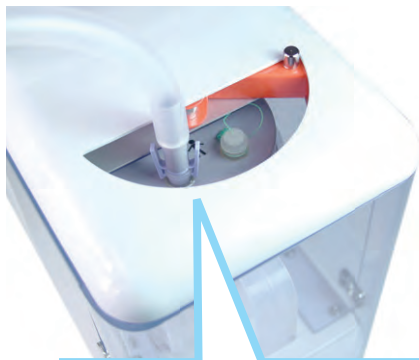

ワンタッチでホースの接続ができます。手際の良さが必要とされる診療先でスピーディーに準備ができます。



満水時吸引停止機構・遠心分離構造は、しぶきレベルで水分の内部浸入を防ぐので機械の異常や故障から守ります。



内蔵のスーパーバイオフィルタで0.3μm以上の粉塵を99.97%捕集するので排気はいつもクリーンです。

※写真は内蔵分離器/約400mlです。

■ オプション(別売) EC分離器(L)/約1200ml  
E421/04560200853968

※効果を保つために3年に1度の交換をお勧めします。

■ スーパーバイオフィルタEC  
B455/04560200853944

## EVERYCURE パッケージ内容



12本入

■ サクションチップLite  
B418/04560200853937  
(14B2X00036000006)



■ ホース  
■ チップハンガー




■ キャリーバッグ



■ 清掃用棒ブラシ

■ 本体(分離器、スーパーバイオフィルタ内蔵)

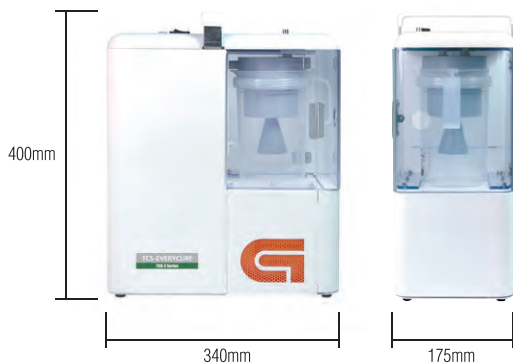

電源	単相100V
電流(50/60Hz)	4.5A
出力(モータ定格)	0.5kW
風量	約0.17m <sup>3</sup> /min
風圧	約11.0kPa
寸法	W340×D175×H400
質量(本体)	約6.0kg
騒音	約63dB

排気	スーパーバイオフィルタ内蔵(HEPAフィルタ)
分離器	満水時フロートにより停止(約400ml) 補助分離器内蔵(約100ml)
製品コード/JAN	E420/04560200850769
医療機器認証番号	222AHBZX00014000 (管理医療機器)
一般的名称	歯科用吸引装置
販売名	TCS-エブリキュア

\*上記は20℃の場合の測定値です。\*寸法の単位はmmです。  
\*仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13  
【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2  
【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-8-22  
【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 イグニティ5  
【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7  
【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37  
ISO9001 ISO13485 認証工場

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760  
tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653  
tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356  
tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876  
tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376  
tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445



■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 通称機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。