



CAPT+

チェアサイド義歯調整用サクシオン

全面透明のクリアヘッド

空気循環を利用した便利な吹き出し

お手入れが簡単な使い捨てフィルタ

マイクロモーター搭載可能

電源はリールコード採用

 株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

CAPT-PLUS (キャプト・プラス)


A222 / 04562199980182

■ Specifications ■ 仕様一覧



1. 全面が透明なクリアヘッドは、作業スペースが広いので快適です。さらに非帯電性の取り替えが簡単なクリアカバーを採用しているため、常に良好な視界でご使用できます。

2. 切削時の空気循環を利用した自由な角度に調整可能な吹き出しは、**切削物の冷却・クリアな視野の確保・切削片の除去**をさらに効率良くおこなえます。吸引機能と合わせてお使いいただくことで快適な作業を可能にします。

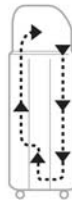

3. ワンタッチで脱着可能な使い捨てフィルターなのでお手入れがとても簡単です。手軽に清掃ができていつもキレイな状態に保てます。

4. お手持ちのマイクロモーターの搭載が可能。さらにサクシオンとスイッチが連動しているため、効率よく手軽に義歯調整を開始いただけます。

5. 電源は、リールコードを採用しました。動きやすく、足元はいつもスッキリ。



機種	電源	電流 (50/60Hz)	出力	風量・風圧	使用口数
	寸法 W×D×H			質量 騒音	ベルト
CAPT-PLUS	単相100V	5.1/4.9A	0.40kW	1.4m ³ /minの時 5.30kPa 約20kg 約63dB	1ヶ所 モータ直結型

*上記は20℃の場合の測定値です。 *寸法の単位はmmです。 *仕様は予告なく変更する場合がございます。

■ Option ■ オプション (別売品)



LEDライト
4つのLEDで手元を確実に照らします。サクシオンの始動とともにスイッチが入ります。



ハイポジションアングル
CAPT-PLUS専用の高さ調整アタッチメント。高さが約13cmUPいたします。



フットコンステップ
本体に装着し、お手持ちのフットコントローラーを載せてください。3段階の角度調整も可能。



交換用フィルタ
標準仕様のフィルタ。5枚入りです。



石膏用フィルタ
石膏を切削、吸引する際の専用フィルタです。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17 (ISO13485 認証工場)

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。 ■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。 ■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。 ■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



JQA-MD0058
横浜工場

歯科用吸引装置、
歯科用吸引装置ポンプ、
電動式吸引器及び
歯面漂白加熱装置の
設計開発及び製造